

Das Matratzensystem für die Dekubitusprophylaxe. Zubehör und Informationen.



Das protecto[®] Konzept

» High-Tech und Qualität

- **protecto[®]** Speziallagerungsmatratzen sind das Ergebnis langer Erfahrung, gezielter Forschung und intensiver Produktentwicklung, sowie Tests in Forschungslabors und Kliniken.
- Zur Herstellung der **protecto[®]** Matratzen verwenden wir ausschließlich hochwertige Polyurethan [PUR] Weichschaumstoffe.
- Der Einsatz solch hochwertiger Schaumstoffe garantiert die lange Lebensdauer des Produkts. Ständige Kontrollen in unabhängigen Testlabors sorgen für gleichbleibend hervorragende Qualität.
- **protecto[®] Med** reagiert auf Körperdruck, wodurch eine konstante Unterstützung gegeben ist. Es kommt nicht zur Kuhlenbildung. **protecto[®] plus** Matratzen sind bis 105°C im VDV-Verfahren autoklavierbar [optimal 70–75°C].
- **protecto[®] plus contour** und **protecto[®] plus XL** und **XXL** sind nicht autoklavierbar. Wir empfehlen für Kliniken und Pflegeeinrichtungen die Ausstattung der Matratzen mit einem protectolon Inkontinenzschutzbezug.
- **protecto[®]** Speziallagerungsmatratzen sind Medizinprodukte und tragen gemäß MPG ein CE-Zeichen.

Atmungsaktivität und Rückstellkraft

- Millionen kleiner offenerporiger Luftzellen bilden die Grundlage für die hohe Atmungsaktivität und Rückstellkraft des Kerns. Das aktive Material garantiert optimalen Feuchtigkeitstransport und angepasstes Liegen.



Speziallagerungsmatratzen aus dem RMT protecto[®] Programm




protecto® Matratzenbezüge

- ➔ Alle **protecto®** Matratzen erhalten Sie entweder mit einem Bezug aus einer hochelastischen Strickware oder einem **protectolon** Inkontinenzschutzbezug. Beide Schutzbezüge sind für Allergiker bestens geeignet.

Frische im Doppelpack:


- ➔ Unsere Strickware ist mit der Spezialfaser **Medicott** ausgerüstet. Medicott ist eine nicht toxische und körperfreundliche Stoffbehandlung. Sie verhindert die Bildung von Schimmelpilzen und geruchsbildenden Bakterien. So hat die Hausstaubmilbe keine Chance.
- ➔ **Medicott** ist mit dem Qualitätssiegel für körperfreundliche Textilien ausgezeichnet.
- ➔ Die **protectolon** Inkontinenzschutzbezüge bestehen aus einer elastischen, flüssigkeitsundurchlässigen, bakteriendichten, aber atmungsaktiven Polyurethan beschichteten Wirkware.
- ➔ **protectolon** Inkontinenzschutzbezüge werden hygienisch korrekt mit einer verdeckten Reißverschlussleiste konfektioniert.
- ➔ **protecto®** Matratzenbezüge sind bis 90° C waschbar.
- ➔ **protectolon** Inkontinenzschutzbezüge sind darüber hinaus per Scheuer- und Wischdesinfektion mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

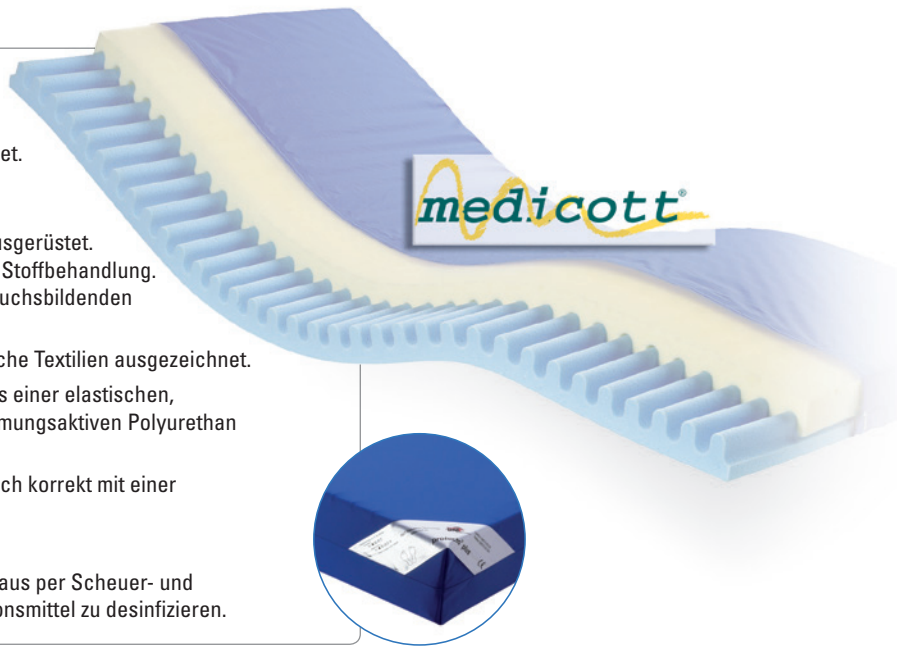

protecto® support

Der bewährte 30° Seitenlagerungskeil – weil Lagerung einfach, bequem und effektiv sein muss.

- ➔ autoklavierbar [optimal 70 – 75° C]
- ➔ mit Strickware- oder Inkontinenzschutzbezug
- ➔ Größe: 70 x 30 x 16 und 7 cm [L x B x H x H]
- ➔ Wir empfehlen den Einsatz von zwei Lagerungskeilen um die gesamte Matratzenlänge unterstützen zu können.

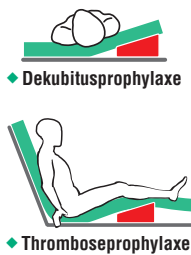


Das RMT-Matratzenprogramm

- ➔ siehe:
 - [protecto_plus.pdf](#) [Universalmatratze]
 - [protecto_plus_contour.pdf](#) [Speziallagerungsmatratze]
 - [protecto_plus_XL_XXL.pdf](#) [Speziallagerungsmatratze]

Dekubitus hat Ursachen

- ➔ **Druck:** **protecto®** Matratzen haben eine spezielle Oberflächenstruktur. Damit wird eine maximale Kontaktfläche geschaffen. Der Auflage- druck wird gleichmäßig verteilt und Druckspitzen vermieden.
- ➔ **Reibung und Scherkräfte:** Vor allem die horizontalen Einschnitte, die elastischen Unterbezüge und die hochelastischen Bezugsstoffe aller **protecto®** Matratzen reduzieren das Risiko auftretender Reibung und Scherkräfte.
- ➔ **Mazeration:** Atmungsaktive oder luftdurchlässige Bezugsstoffe, sowie hochgradig offenporige Schaumstoffe, verhindern ein Aufweichen der Haut durch Mazeration.

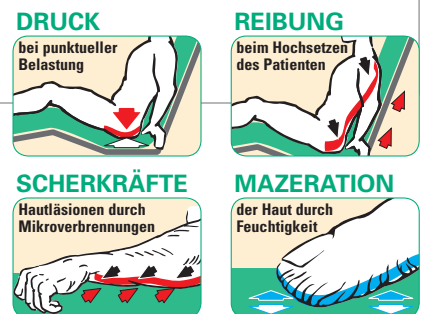

Unser Programm: **Prophylaxesysteme** Patientenlifter Schwimmbadlifter Rehasysteme Transportsysteme



Elastica Matratzen - Schaumstoffe - Zubehör Gesellschaft m.b.H.
Kellau 153 / A-5431 Kuchl bei Salzburg

Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor. Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

RMT RehaMed Technology GmbH

Waldstraße 66a | 63128 Dietzenbach | Postanschrift: Postfach 1101 | 63111 Dietzenbach
Tel. 0 60 74 / 82 13 0 | Fax 0 60 74 / 82 13 20 | info@rmt.eu | www.rmt.eu